
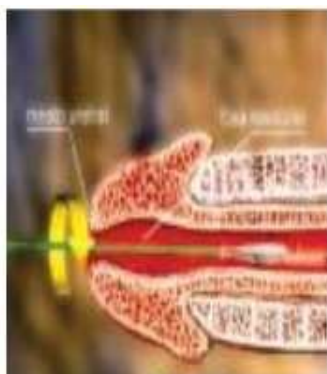


GRAM DE SECREÇÃO URETRAL


Instrução de Coleta

1. Retire da embalagem a lâmina e identifique-a
2. Solicite ao paciente para retrair o prepúcio
3. Limpe a secreção emergente com gaze estéril
4. Certifique-se de que a uretra esteja reta
5. Introduza o *swab* cerca de 2 centímetros no canal uretral atravessando a fossa navicular (se necessário umedecer o *swab* com solução salina ou soro fisiológico)


Anatomia da Uretra Masculina

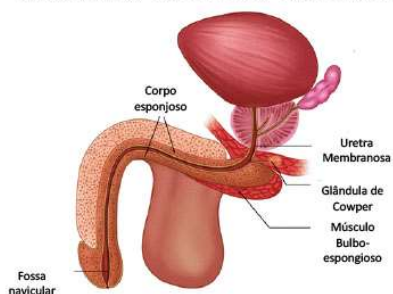

6. Gire o *swab* delicadamente de 8 a 10 vezes para absorver a secreção
7. Retire o *swab*, coloque a secreção sobre a lâmina, homogeneíze e espalhe uniformemente de modo circular sobre a lâmina

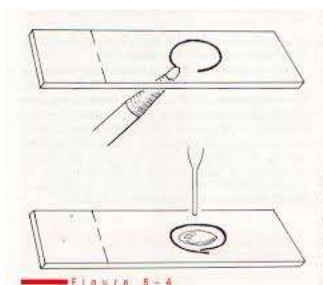

8. Identifique a lâmina adequadamente, coloque no frasco coletor de lâmina sem nenhum reagente e/ou conservante, e encaminhe o exame ao laboratório

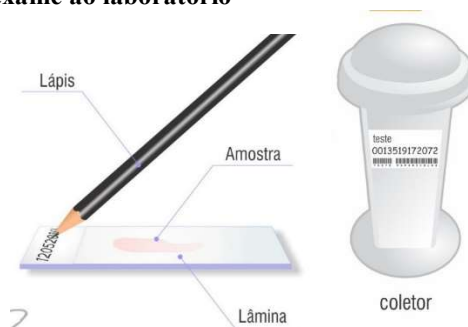

9. Após a coleta enviar ao laboratório em no máximo 5 dias